

## SINGEL™ 5100 HERKULES

*En portabel lyft för de verkligt tunga lyften*




- Möjliggör tunga lyft
- Grå Teleskopbygel™
- Tandemkoppling



Singel™ 5100 Herkules har samma finesser och möjligheter som Singel™ 5100. Den stora skillnaden är att Singel™ 5100 Herkules klarar att lyfta hela 300 kg, vilket gör den starkast i sin klass. Dessutom kan två lyftar kopplas ihop i tandem och lyfta hela 455 kg. För att göra Singel™ 5100 Herkules lätt att skilja från Singel™ 5100 har den försetts med en grå Teleskopbygel™. Hela lyften är byggd i en robust aluminiumkonstruktion för att tåla den högre belastningen.


Även Singel™ 5100 Herkules är försedd med två hastigheter, DualSpeed™. Det innebär att lyften höjs och sänks med högre hastighet när den är obelastad, vilket minskar väntetiderna och ökar effektiviteten. Av säkerhetsskäl kopplas dock denna funktion automatiskt ur när lyften belastas med 35 kg eller mer.

En annan finess som ökar vårdtagarens komfort är den konstanta lyfthastigheten oavsett patientens vikt. I kombination med en mjuk start och stopprörelse, SoftMotion™, blir lyftet därmed en riktigt behaglig och trygg upplevelse.

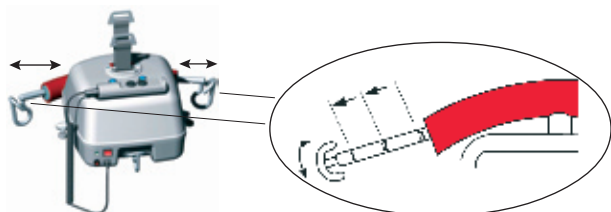

# SINGEL™ 5100 HERKULES

1. Taklyft Singel™ 5100 Herkules
2. Laddare (Art. nr. 50084)
3. Handkontroll (Art. nr. 50004)
4. UP-knapp (Handkontroll)
5. DOWN-knapp (Handkontroll)
6. Lyftband
7. Bandsträckeravakt
8. Teleskopbygel™
9. Galgbygel
10. UP-knapp (på lyften)
11. DOWN-knapp (på lyften)
12. Benkrok
13. Strömbrytare/Nödstopp
14. Indikatorlampa
15. Nödfirningsknapp
16. Anslutning handkontroll
17. Nätsladd

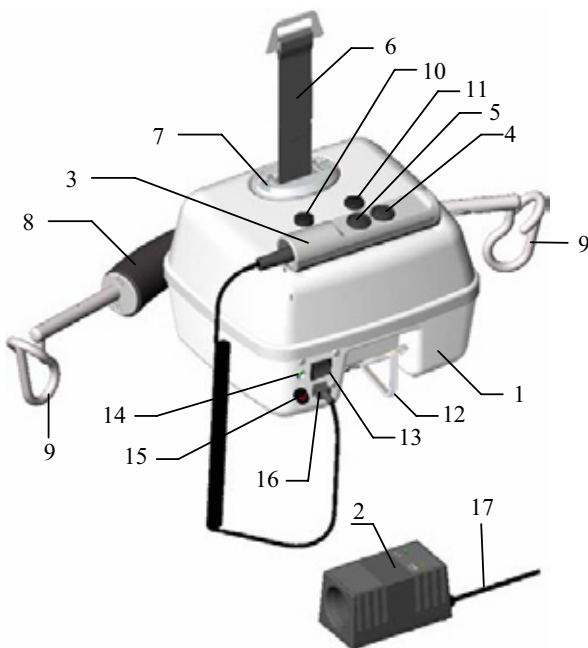

## Singel™ 5100 Herkules

Art.nr	Max belastning (kg)	Dimensioner (mm)	Produktvikt (kg)	Batteri	Batteriladdare	Lyfthastigheter (m/min)	Nödfirning
50500	300	450x325x175	9,9	2x12V 3,2 Ah	Input 100-250 V, AC 50-60 Hz Output 24V, 0,5A DC	Nivå 1: 1,8 Nivå 2: 3,0 (Endast obelastad)	Elektronisk
SoftMotion™		Indikatorlampa		Teleskopbygel™		Handkontroll	Typ och klass
Mjukstart/Mjukstopp		Stand by: Blinkande grön Aktiv: Fast grön Låg spänning: Blinkande röd Felsignal: Fast röd		Tre möjliga bredder med en och samma bygel, 35, 45 och 55 cm		Klass IP 65 (Laddning genom handkontrollen, Art. nr. 50004)	B klassIII IP 21

