


Diskret skensystem med flera infästningsalternativ

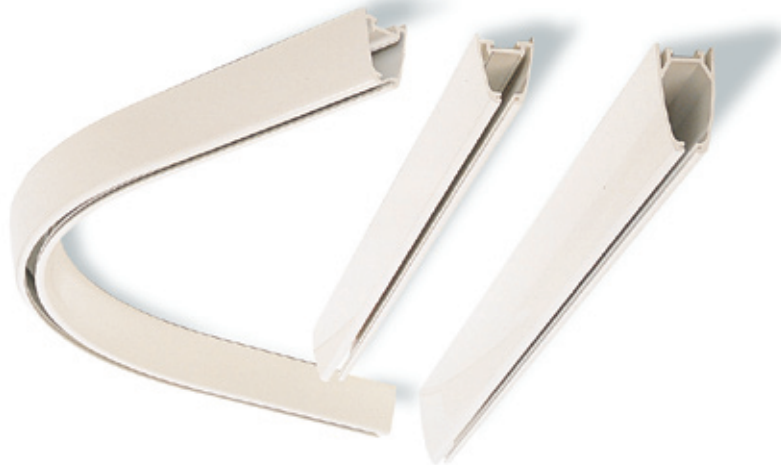

- **Infästningsmöjligheter från tak, vägg och golv**
- **Diskret design**
- **Kan fällas in i undertak**

Skensystemen är designade för att vara så diskreta som möjligt. Systemen kan enkelt anpassas för brukarens individuella behov och lösningarna kan användas oberoende av rummets planlösning och byggnadens struktur. Välj på raka skenor, kurvbanor eller traverser, alla dessa kan tak- eller väggmonteras, alternativt monteras fristående på golvstolpar. Skenorna kan även kombineras ihop till små eller stora skensystem.

Vid behov av rum-till-rum överföring mellan, t.ex. sovrum och badrum, monteras skensystem i respektive rum. Med taklyften Roomer™ 5200 kan förflyttning ske horisontellt mellan skensystemen genom en standard dörröppning.

Skenorna finns i tre olika profiltyper, 80, 100 och 160 mm och är tillverkade av pulverlackad strängpressad aluminium. Alla skenprofiler finns lagerhållna i olika standardlängder. Kurvor finns även för takmontering till 100 och 80 profilen. 80 profilen kan med fördel fällas in snyggt i undertak.

80 Profil

Enkel profil till ett lägre pris som rekommenderas till rakbanor, kurvbanor eller mindre traverser. Monteras direkt mot tak, med dolda pendelfästen, eller med synliga takfästen, alternativt väggmontering. Rekommenderas vid inbyggnad i undertak tillsammans med hyllprofiler längs sidorna.



100 Profil

Standard profil som kan användas vid de flesta installationer. Diskret designad utformning som smälter väl in i de flesta miljöer. Dolda infästningar vid takmontering. Med hyllprofiler längs sidorna kan skenorna fällas in i undertak.

160 Profil

Standard profil som används när fribärande längd överskrider måtten för 100-profilen. Diskret designad utformning som smälter väl in i de flesta miljöer. Används för vägg- och golvmonteringar, samt till traversskena. Med hyllprofiler längs sidorna kan skenorna fällas in i undertak.

Skensystem

Art.nr	Produkt	Material	Färg	Fribärande längd (mm)	Monteringsalternativ
50237	80 Profil	Strängpressad Aluminium	Pulverlackad vit (NCS 0502Y)	2700 (max vikt 220 kg) 3250 (max vikt 150 kg)	Takmontering, Infälld i undertak, Vägghmontering, Mindre traverssystem
20092	100 Profil	Strängpressad Aluminium	Pulverlackad vit (NCS 0502Y)	3550 (max vikt 220 kg) 4250 (max vikt 150 kg)	Takmontering, Vägghmontering, Golvmontering, Traverssystem
20137	160 Profil	Strängpressad Aluminium	Pulverlackad vit (NCS 0502Y)	6700 (max vikt 220 kg) 6900 (max vikt 150 kg)	Takmontering, Vägghmontering, Golvmontering, Traverssystem

Tillbehör



Art. nr: 20124
Mellanstycken



Art. nr: 20162
Lock 100



Art. nr: 20179
Lock 160



Art. nr: 50253
Lock 80




Art. nr: 20069
Ställbar dämpare



Art. nr: 20133
Traversvagn



Art. nr: 20545
Traversvagn



Art. nr: 20540
Traversvagn



Art. nr: 20107
Löpvagn



Art. nr: 20529
Löpvagn

